

取扱説明書 コンパクト体重計 型番: ECF-SWS2



目次

安全上の注意	2
表示について	2
警告	2
注意	2
各部のなまえ	3
電池の入れかた	4
使いかた	4
製品仕様	5
エラーコードについて	5
ノジマモバイル会員登録について	5
保証書・保証規定・お問合せ	6
メモ	7

- この度はノジマ ELSONIC コンパクト体重計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 - この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることができる場所に保管してください。
 - 保証書はこの説明書の6ページに載っています。レシートとともに保管ください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意

表示について

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

禁止 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

強制 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- 禁止** ■絶対に分解・改造しないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。
- 禁止** ■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。
- 禁止** ■本製品は家庭用です。業務用(病院などでの測定)には絶対に使用しないでください。
業務用として使用するための機能を備えていません。
- 禁止** ■測定結果は、決して自己判断しないでください。
自己判断による減量や運動療法は健康を害する原因になります。資格を持った専門家の指示に従ってください。
- 禁止** ■本製品の端ののったり、飛びののたり、飛び跳ねたりしないでください。
転倒してけがをする原因になります。
- 禁止** ■タイルの床やぬれた床などすべりやすいところでは使わないでください。
すべて転倒してけがをする原因になります。
- 禁止** ■体のご不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しないでください。
介護の方が援助するか、手すりをご利用ください。
- 強制** ■濡れた体や足の水分をよく拭いてから測定してください。
転倒してけがをする原因になります。

注意

- 禁止** ■強化ガラスを使用しておりますが、本体を倒したり、落としたり、上に物を落とすなど、本体に強い衝撃を与えないで下さい。
衝撃によりガラスが割れ、ケガや故障の原因になります。
- 禁止** ■新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。
液漏れ、発熱、破裂、故障の原因になります。

各部のなまえ

表面

重量表示
ディスプレイ

56.8 kg

ELSONIC


- 表示ディスプレイは、乗ると自動的に点灯します。

底面

ゴム足

電池
カバー

電池の入れかた

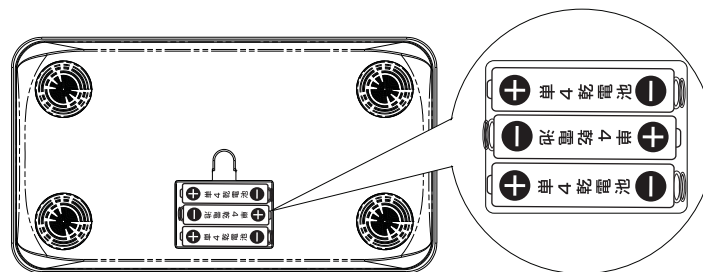

- 電池カバーを開け、単4形電池3本を極性を正しく入れ、バッテリーカバーを閉めてください。

⚠ ご注意

- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂、故障の原因になります。

使いかた

- 表示ディスプレイは、乗ると自動的に点灯します。



⚠ ご注意

- タイルの床やぬれた床などすべりやすいところでは使わないでください。すべて転倒してけがをする原因になります。
- 本製品の端にのったり、飛びのったり、飛び跳ねたりしないでください。転倒してけがをする原因になります。
- 濡れた体や足の水分をよく拭いてから測定してください。転倒してけがをする原因になります。
- 強化ガラスを使用しておりますが、本体を倒したり、落としたり、上に物を落とすなど、本体に強い衝撃を与えないで下さい。衝撃によりガラスが割れ、ケガや故障の原因になります。

製品仕様

型番	ECF-SWS2
ひょう量	150kg
目量	200g
測定範囲の下限値	5kg
電池	単4形1.5V x 3 (4.5V)
本体寸法	横225 x 縦125 x 高さ22.5mm
本体質量	550g (電池を含まず)
付属品	保証書付き取扱説明書

仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



家庭用特定
計量器の表示

エラーコードについて

エラー表示	原因
	電池残量低下 電池を交換してください。
	重量オーバー 本製品は150kg以上を測定できません。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員
にご登録ください。

お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残
すことができ、各種サービスを受けられます。



保証書

型番	ECF-SWS2	管理番号	
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管ください			

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一製造上の問題で、故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
- 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
 - 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問合せ

本製品のサポートは、ノジマ カスタマーセンターで受け付けています。

ノジマ カスタマーセンター

電話: 045-228-3546

営業時間: 9:30~19:00 (365日)

※メンテナンスの関係上お休みをいただく場合があります。

ホームページ

URL: <http://www.nojima.co.jp>

ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 1 - 1 - 1

Ver. 2.0